



リグロスの調製方法

1: 部材の確認・取り出し

開封口よりシールをはがします。下図の部材が入っていることをご確認ください。
確認後、注意して全ての部材を清潔な場所に取り出してください。

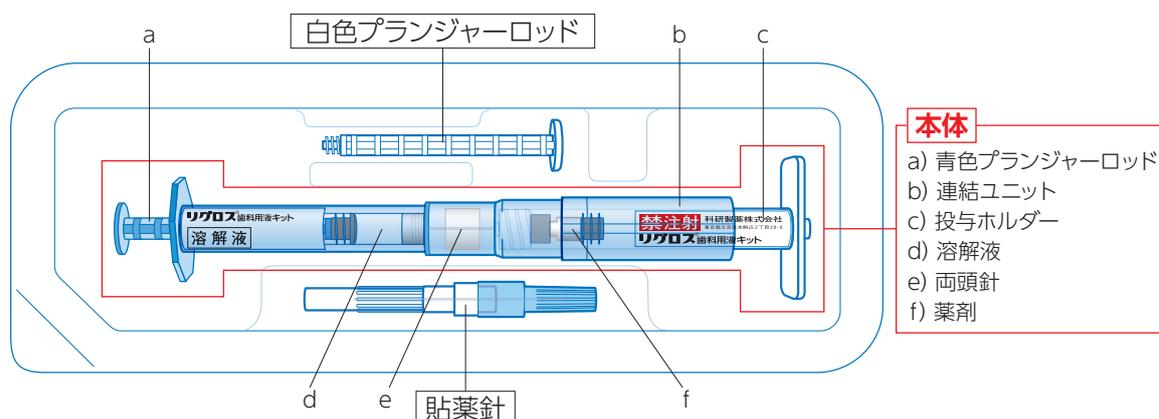

2: 投与ホルダーの押し込み

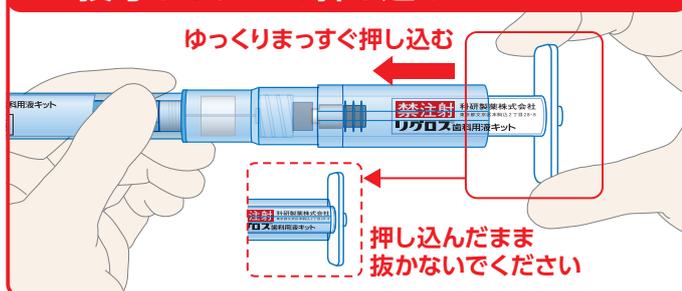

注意して本体を手に取り、投与ホルダーをゆっくりまっすぐ最後まで押し込みます。

押し込んだ後は左図点線枠内の状態となり、薬剤と溶解液が両頭針で連結されます。

※注意：投与ホルダーは押し込んだまま抜かないでください。


3: 溶解液の移動



青色プランジャーロッドを止まるまで押し込みます。

溶解液全量が投与ホルダー側に移動します。

4: 白色プランジャーロッドの装着

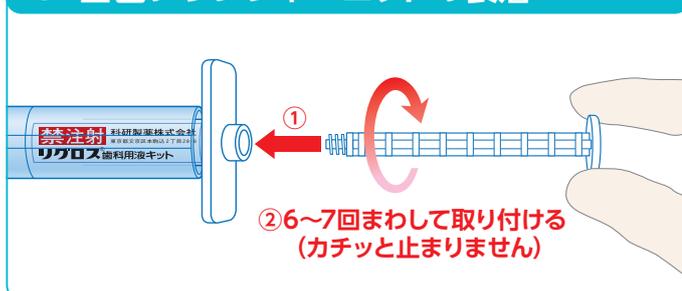

白色プランジャーロッドを投与ホルダーに挿入し①、軽く押しながら時計まわりに6~7回まわして取り付けます②。

※注意：まわし続けてもカチッと止まりませんが、6~7回で装着は完了しています。

5：薬剤の混合溶解




白色プランジャーロッドを止まるまでゆっくり押し込んだ後(①)、青色プランジャーロッドをゆっくり押し込みます(②)。この操作を交互に10回(5往復)繰り返します。

この操作により、薬剤が完全に溶解し、均一になります。

※注意：気泡により薬剤が白く見えることがありますが、品質に影響はありません。

6：薬液の確認・取り出し

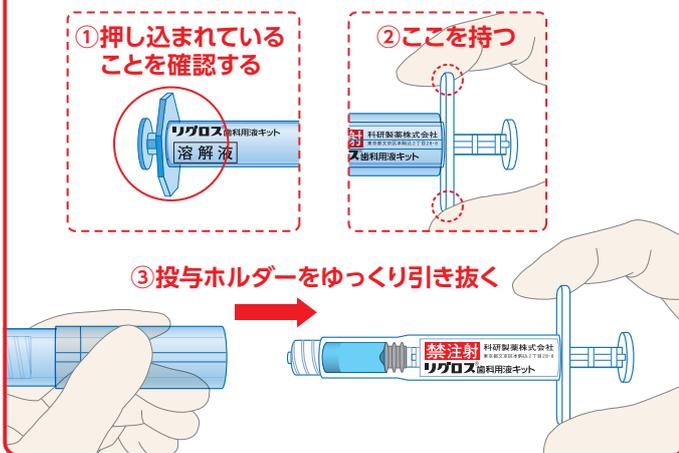


青色プランジャーロッドが止まるまで押し込まれていることを確認します(①)。

薬液全量が投与ホルダー側に移送された状態です。

白色の投与ホルダーのつばを持ち(②)、連結ユニットからゆっくり引き抜いて(③)、いったん清潔な場所に置きます。


7：貼薬針の装着準備

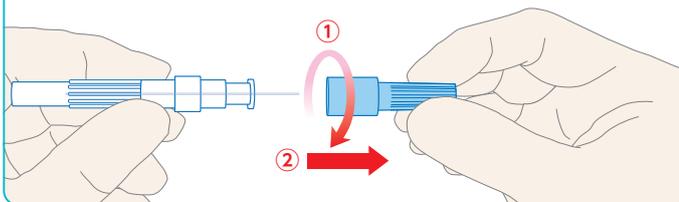

貼薬針の装着は投与直前に行ってください。

貼薬針の青いキャップをひねって(①)外します(②)。

8：貼薬針の装着

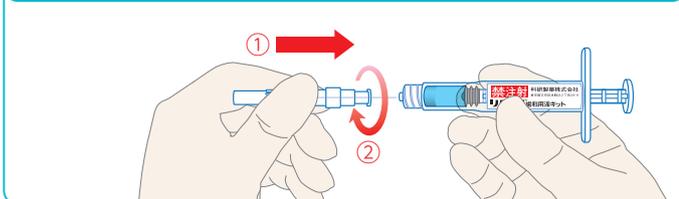

投与ホルダーの先に貼薬針を挿入し(①)、時計まわりに止まるまで締め付けます(②)。

以上で調製は完了です。貼薬針の白いキャップは投与直前まで外さないでください。

粘性が高く、貼薬針が細いため、投与の際はしっかり押ししてください。
薬液が少なくなると固く感じる場合があります。